


Springmask Tejpprov - Patientinstruktion egenprovtagning

Inför provtagningen behövs:

- Remiss; elektronisk (Cosmic-etikett) eller pappersremiss.
- Genomskinlig tejp.
- Objektglas (2 st.), objektglashållare.
- Om provet ska skickas med post behövs: vadderat kuvert med adress och porto.

Gör så här:

1. 2 st. prov tas på morgonen när man vaknar efter en natts sömn. Provtagning görs innan toalettbesök och/eller dusch/bad.
(Alternativt kan provtagning göras några timmar efter sänggående.)
2. Den klistriga sidan av en ca 5 cm lång genomskinlig tejprensa trycks på flera ställen mot huden runt anusöppningen.
3. Fäst genomskinliga tejpbiten på objektglas. OBS! Klistra endast en sida på objektglaset, vertikalt. Vira ej runt glaset flera varv.

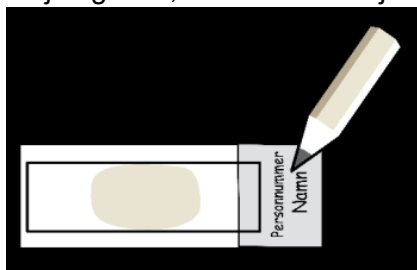

4. Märk objektglaset med blyertspenna: namn, personnummer och provtagningsdatum. Fyll även i dessa uppgifter på pappersremiss om sådan finns.
5. Stoppa objektglaset i objektglashållare.
6. Provet bör omgående lämnas till din hälsocentral, mottagning, vårdavdelning eller provinlämningen på Laboratoriemedicin.
7. Förvara ditt prov i rumstemperatur eller kylskåp (+2-8°C) i väntan på transport till laboratoriet.
8. Om provet ska skickas med post, lägg objektglaset i objektglashållare och eventuell remiss i vadderat kuvert.

Vid frågor ring: Mikrobiologen, telefon 063-15 36 25.